

Параметры для ввода в программу анализатора BioSystems A-15

Общие | Процедура | Калибровка | Контроли | Опции

Тест идентификации

Название:

Тип Пробы: SER

Режим анализа:

Единицы:

Турбидиметрический тест

Тип реакции:

Возрастающая

Убывающая

Кол-во повторов:

Десятичные знаки:

Test Name in the Report

Общие | Процедура | Калибровка | Контроли | Опции

Считывание:

Монохроматика

Бихроматика

Фильтры:

Основной:

Референснв:

Объемы:

Проба: μ L

Реактив 1: μ L

Реактив 2: μ L

Промывание: mL

Время:

	[s]	Циклы
Чтение 1	<input type="text" value="264"/>	<input type="text" value="12"/>
Чтение 2	<input type="text" value="600"/>	<input type="text" value="26"/>
Реактив 2	<input type="text" value="288"/>	<input type="text" value="13"/>

Фак-р Предразв.:

Фак-р Предразв.

Предразв. Анализатором

Предразв. Пользователем

Фак-р Постразв.:

Уменьшенный:

Увеличенный:

Автоматический повтор

Параметры для ввода в программу анализатора BioSystems A-15

Общие | Процедура | Калибровка | Контроли | Опции

Тип калибровки

Фактор x

Мульти калибратор

Моно калибратор

Повтор калибратора

Повтор бланка

Исп. Альтернативный калибратор

Моно калибратор

Концентрация	Фактор
(маж) 1	x <input type="text" value="1"/>
2	x <input type="text" value=""/>
3	x <input type="text" value=""/>
4	x <input type="text" value=""/>
5	x <input type="text" value=""/>
6	x <input type="text" value=""/>
7	x <input type="text" value=""/>
(мин) 8	x <input type="text" value=""/>

Калибровочная кривая

Возрастающая

Убывающая

Полигональная

X-ось

Y-ось

Сохранить


Общие | Процедура | Калибровка | Контроли | Опции

Кол-во контролей

Повтор контроля

Сигмы S

Тип Контроля

Мульти 

Моно

Режим расчета

Ручной

Статистический


Кол-во Серий

Мульти

	Контроль 1	Контроль 2
Название	**	**
Лот	**	**
Мин. значение	1	2
Макс. значение	2	3

Сохранить

Параметры для ввода в программу анализатора BioSystems A-15

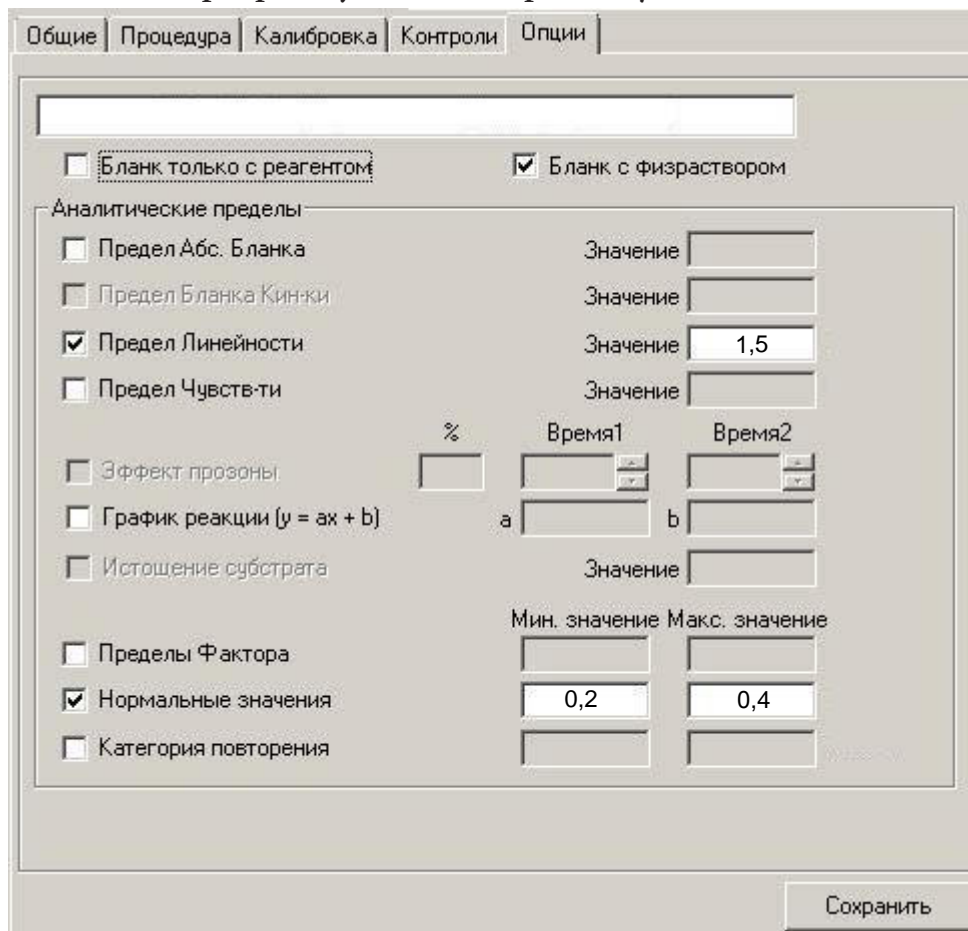

Общие | Процедура | Калибровка | Контроли | Опции

Бланк только с реагентом Бланк с физраствором

Аналитические пределы

Предел Абс. Бланка Значение

Предел Бланка Кин-ки Значение

Предел Линейности Значение

Предел Чувств-ти Значение

Эффект прозоны % Время1 Время2

График реакции ($y = ax + b$) a b

Истощение субстрата Значение

Пределы Фактора Мин. значение Макс. значение

Нормальные значения

Категория повторения

Сохранить

******-вводится из паспорта к контрольному материалу.

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.