

Параметры для ввода в программу анализатора BioSystems A-25

Общие | Процедура | Калибровка | Контроли | Опции

Тест идентификации

Название:

Тип Пробы: SER

Режим анализа:

Единицы:

Турбидиметрический тест

Тип реакции:

Возрастающая

Убывающая

Кол-во повторов:

Десятичные знаки:

Установленные Реагенты:

Реагент 1

Реагент 2

Test Name in the Report

Общие | Процедура | Калибровка | Контроли | Опции

Считывание:

Монохроматика

Бихроматика

Фильтры:

Основной:

Референснй:

Объемы:

Проба:

Реагент 1:

Реагент 2:

Промывание:

Время:

	[s]	Циклы
Чтение 1	<input type="text" value="285"/>	<input type="text" value="20"/>
Чтение 2	<input type="text" value="600"/>	<input type="text" value="41"/>
Реагент 2	<input type="text" value="300"/>	<input type="text" value="21"/>

Фак-р Предразв.:

1/

Предразв. Анализатором

Предразв. Пользователем

Фак-р Постразв.:

Уменьшенный: 1/

Увеличенный: x

Автоматический повтор

Параметры для ввода в программу анализатора BioSystems A-25

Общие | Процедура | **Калибровка** | Контроли | Опции

Тип калибровки

Фактор x
Повтор калибратора
 Мульти калибратор
 Повтор бланка
 Моно калибратор
 Исп. Альтернативный калибратор

Точки калибровочной кривой
 Num. Calib

Подготовлено пользователем
 Выполняется анализатором

Калибровочная кривая

Возрастающая Убывающая

X-ось
 Y-ось

Моно калибратор


(Уровень)	Концентрация
1	*
2	*
3	*
4	*
5	*
6	
7	
8	

Сохранить

Общие | Процедура | Калибровка | **Контроли** | Опции

Кол-во контролей
Повтор контроля
 Сигмы S

Тип Контроля

Мульти 
 Моно

Режим расчета


Ручной
 Статистический
 Кол-во Серий

Мульти

	Контроль 1	Контроль 2
Название	**	**
Лот	**	**
Мин. значение	1	2
Макс. значение	2	3

Сохранить

Параметры для ввода в программу анализатора BioSystems A-25

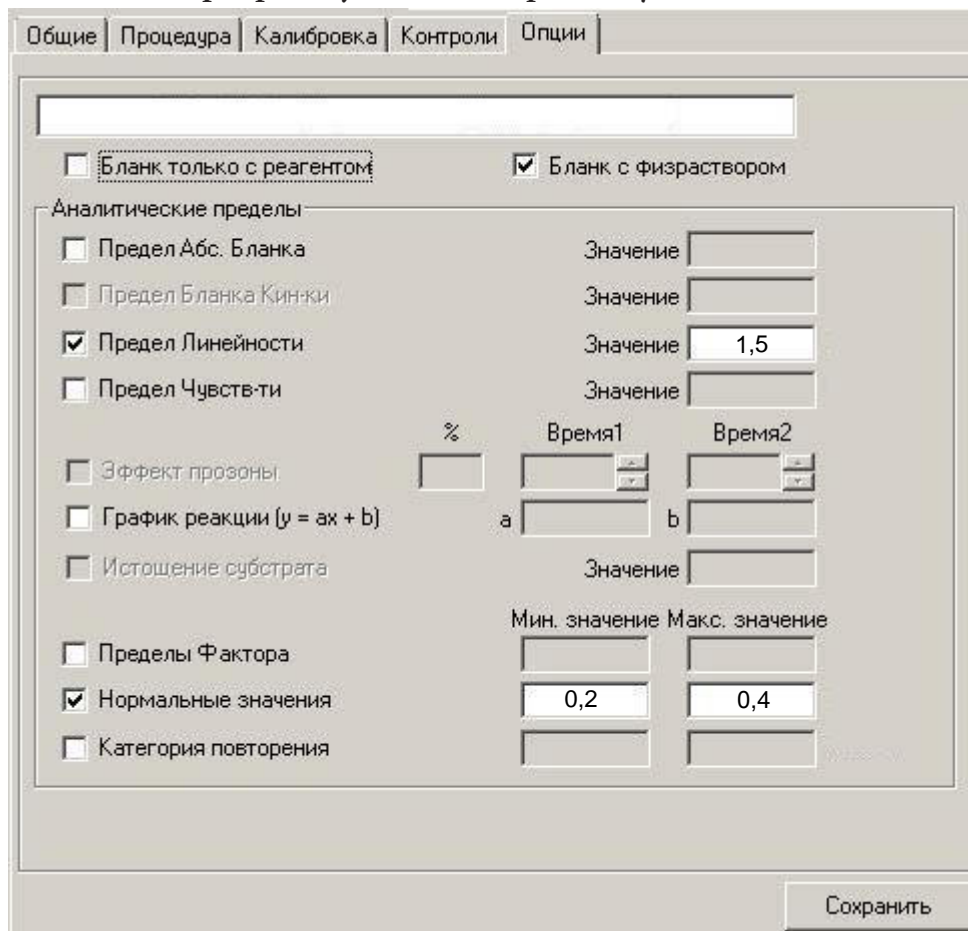

Общие | Процедура | Калибровка | Контроли | Опции

Бланк только с реагентом Бланк с физраствором

Аналитические пределы

Предел Абс. Бланка Значение

Предел Бланка Кин-ки Значение

Предел Линейности Значение

Предел Чувств-ти Значение

Эффект прозоны % Время1 Время2

График реакции ($y = ax + b$) a b

Истощение субстрата Значение

Пределы Фактора Мин. значение Макс. значение

Нормальные значения

Категория повторения

Сохранить

** -вводится из паспорта к контрольному материалу.

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.