



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200 /200 new.

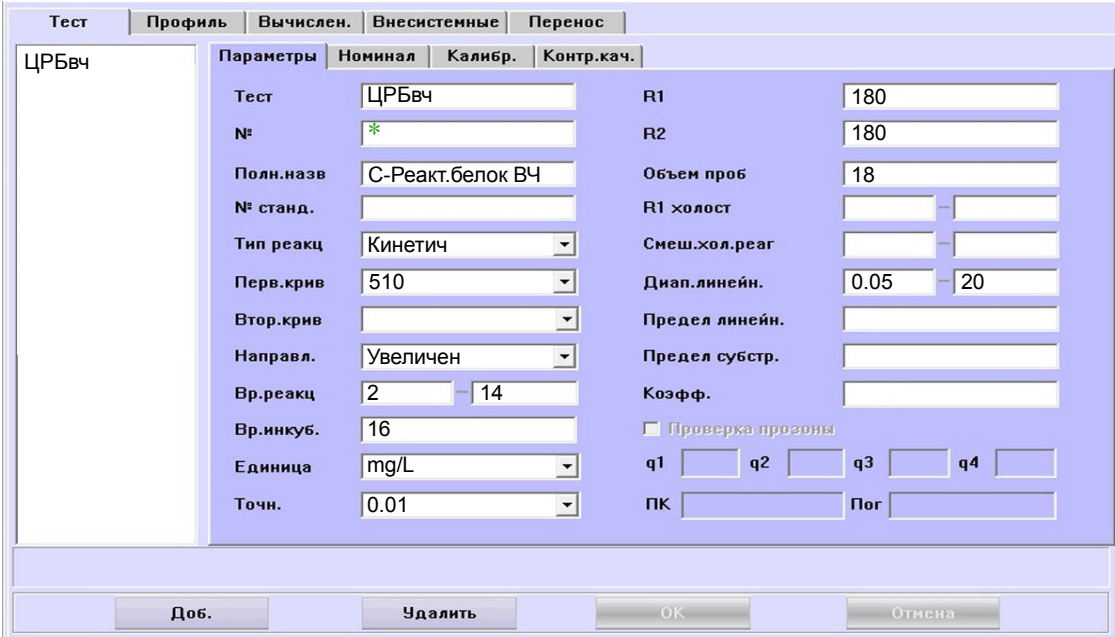

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

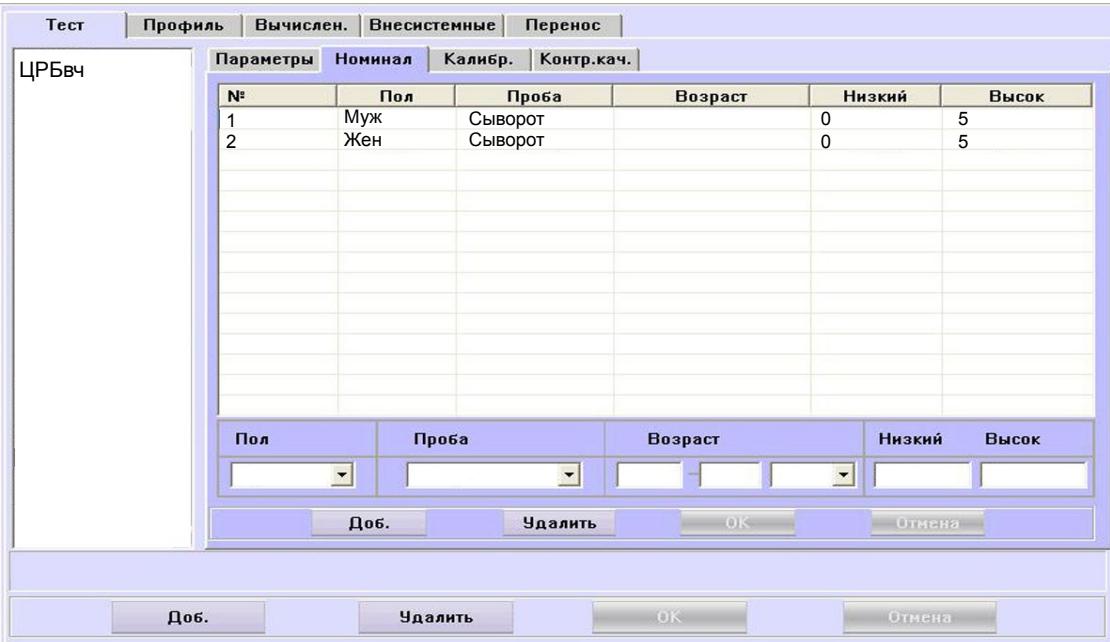

Значения калибраторов и контрольных материалов вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно

ЦРБвч

Параметры Номинал Калибр. Контр.кач.

Прав. Logit-Log-5P

Чувствител

Повторы 2

Интервал(дн)

Предел разл.

SD

Холост. ответ

Предел ошибки

Определение коэф. 0

Калибраторы

Назв	Конц.
<input checked="" type="checkbox"/> NaCl	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> CRPhs-1	**
<input checked="" type="checkbox"/> CRPhs-2	**
<input checked="" type="checkbox"/> CRPhs-3	**
<input checked="" type="checkbox"/> CRPhs-4	**
<input checked="" type="checkbox"/> CRPhs-5	**

Назв

Конц.

Разв.кал

Подробнее

Выбор правила калибровки

Доб. Удалить ОК Отмена

** - вводится из паспорта к калибратору.

Тип калибровки: Лог-лог5р, (сплайн) 6 точек, набор стандартов TruCal CRP-hs 5 уровней + вода (или физраствор)).

Контроль по TruLab CRP-hs уровень 1 и уровень 2.