

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-400

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами


Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Пол	Проба	Нижний предел	Верхний предел
Мужской	Сыворотка	22	29
Мужской	Плазма		
Мужской	Моча		
Женский	Сыворотка	22	29
Женский	Плазма		
Женский	Моча		

Значения калибраторов и контрольных материалов вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-400

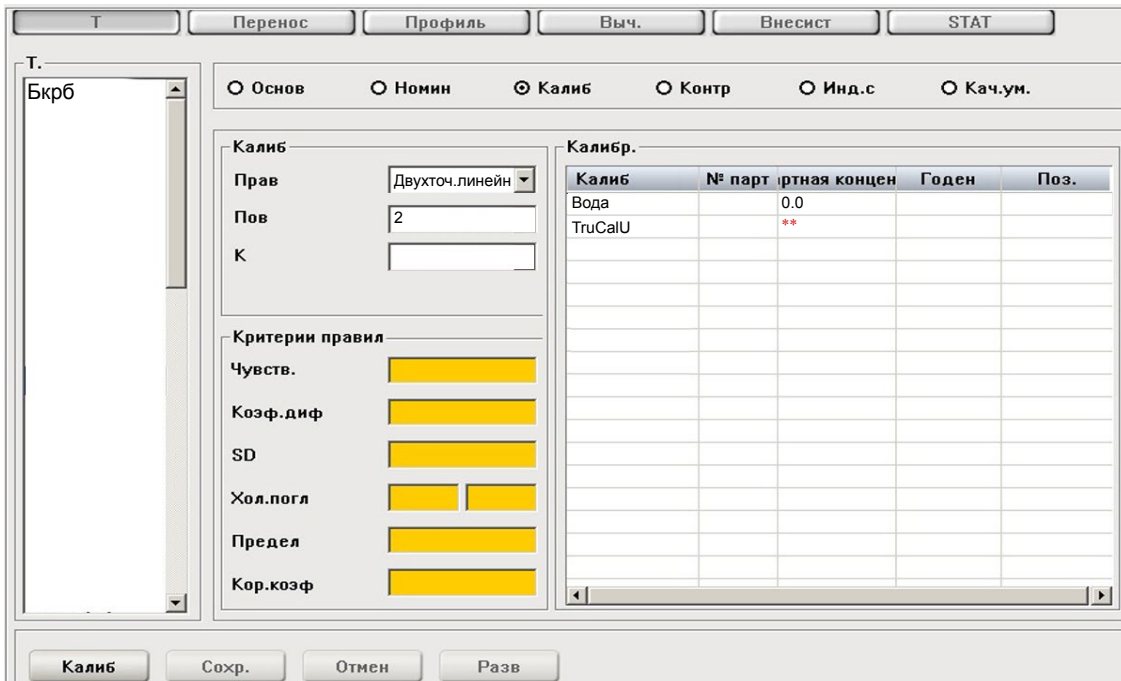

Калиб	№ парт	ртная концен	Годен	Поз.
Вода		0.0		
TruCalU		**		

** - вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: линейная (Bicarbonate Standard).

Контроль по TruLab Bicarbonat (один уровень).