



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-380

Биреагентное применение

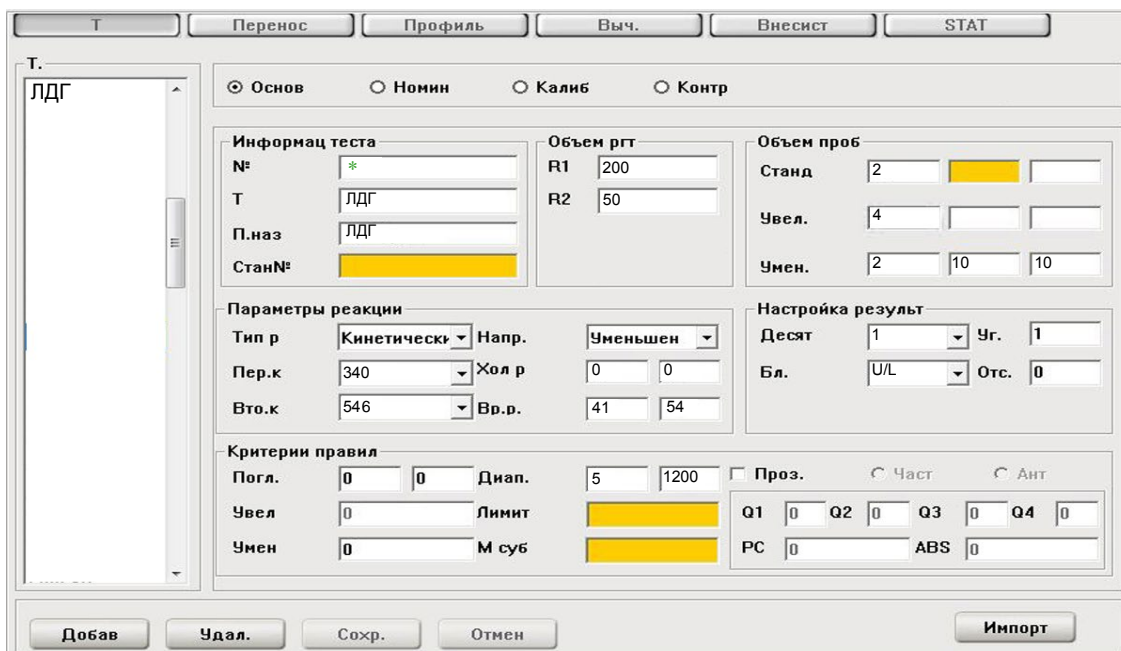

Монореагентное применение

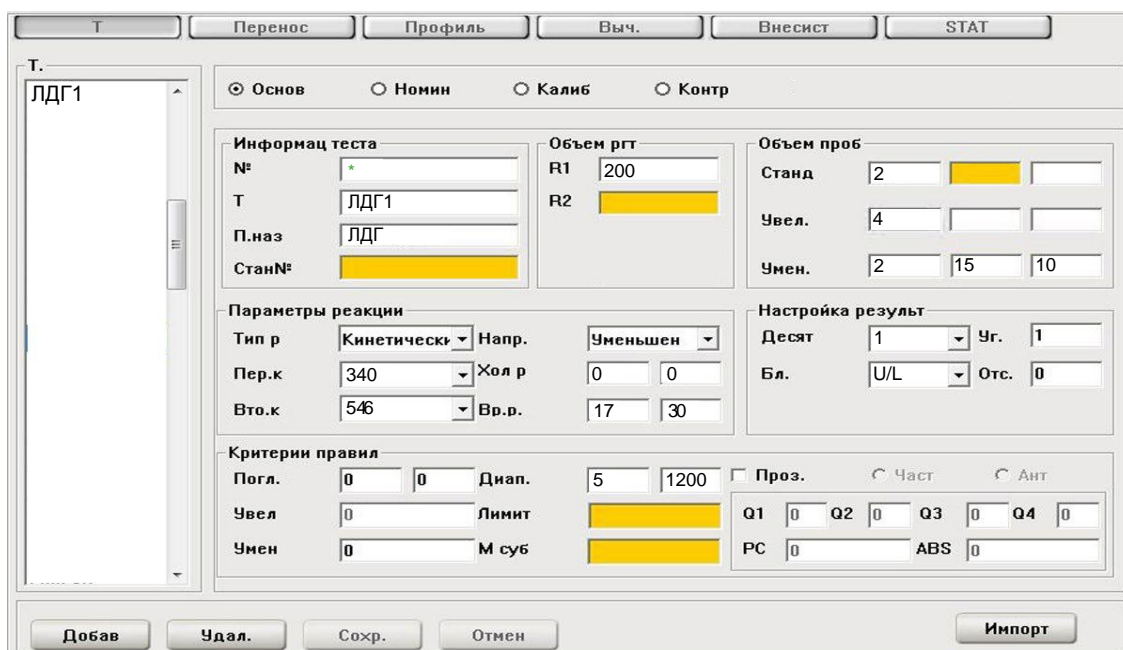

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

ЛДГ (лактатдегидрогеназа)

DGKC-1970



Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Пол	Проба	Нижний предел	Верхний предел
Мужской	Сыворотка	0	480
Мужской	Плазма		
Мужской	Моча		
Женский	Сыворотка	0	480
Женский	Плазма		
Женский	Моча		

Калиб	№ парт	ртная концен	Годен	Поз.
Вода		0.0		
TruCalU		**		

** - вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: Линейная (калибратор TruCalU) или по фактору.

Контроль по TruLab N и TruLab P.